



inFace IPL Hair Removal

Korisničke upute

InFace Sonic uređaj za lasersko uklanjanje dlačica neovisno je razvijen i proizveden u Shenzhen inFace Technology Co.Ltd., koja je povezana sa Shenzhen Migoo Smart Co. Ltd. Otkako je tvrtka osnovana, temeljni koncept dizajniranja je praktičnosti, funkcionalnosti i sigurnosti, s ciljem stvaranja proizvoda s tehnologijom i intelektom, i nastojeći istražiti i inovirati.

Aparat za lasersko uklanjanje dlačica

Učinkovitost proizvoda

IPL depilacija ne nadražuje, sigurna je i prikladna

OPREZ

Molimo pažljivo pročitajte ove upute i pravilno ih čuvajte prije upotrebe proizvoda.

- Koristite adapter napajanja koji dođe sa proizvodom i ispravno spojite utikač ispravljača u utičnicu za kućanstvo kako biste izbjegli oštećenja.
- Nemojte koristiti ovaj proizvod u okruženju s visokim temperaturama.
- Ako je proizvod deformiran ili oštećen, nemojte ga ponovno koristiti kako biste izbjegli opasnost.
- Ne upotrebljavajte na koži koja je opečena od sunca ili na kozmetičkim operacijama ili ranjenim mjestima.
- Nemojte koristiti ovaj proizvod ako postoje tamne mrlje poput pjega, rodnih žigova, mladeža, tetovaža i područja trajne šminke.
- Ne koristite ovaj proizvod tijekom trudnoće i dojenja.
- Prije uporabe osušite ruke kako biste spriječili da voda ili druga tekućina uđu u instrument i tako oštete instrument.
- Pogledajte tablicu intenziteta svjetlosti kako biste utvrdili odgovarajući intenzitet svjetlosti; Ako osjetite bol ili abnormalnost na koži ili tijelu, molimo vas da je odmah prestanete koristiti.
- Prekinite napajanje za čišćenje i održavanje.
- Ovaj proizvod nije prikladan za djecu, čuvajte ga izvan dohvata djece.
- Ne koristite ovaj proizvod (alkohol, benzin, sredstvo za uklanjanje laka za nokte, sprej, itd.) U blizini zapaljivih predmeta.
- Ne upotrebljavajte ovaj proizvod u okolišu s vodom kako biste izbjegli opasnost (u blizini kade, tuša, umivaonika itd.).
- Ne jedite hranu osjetljivu na svjetlost (poput špinata, repice, senfa itd.) Tijekom uporabe.
- Tijekom rada strogo je zabranjeno pokrivati ulaz za zrak i otvore za odzračivanje, kako bi se spriječio utjecaj na odvođenje topline.
- Nemojte sami rastavljati ili popravljati ovaj proizvod. Za pitanja održavanja obratite se trgovcu koji je kupio ovaj proizvod nakon prodaje.
- Molimo vas da na vrijeme napravite zaštitu od sunca nakon upotrebe ovog proizvoda.


DETALJI O PROIZVODU

Otvorite pakovanje i vidjet ćete:

1. InFace IPL uređaj za lasersko uklanjanje dlačica x1
2. Adapter za punjenje x1
3. Korisničke upute i jamstvena kartica x1
4. Zaštitne naočale za oči x1
5. Britva x1



Korisničke upute i jamstvena kartica

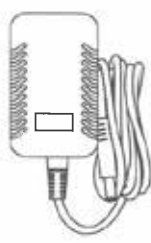

Adapter za punjenje



Britva



Zaštitne naočale za oči



Napomena: Slike i povezane značajke proizvoda opisane u ovom priručniku i neke definicije pojmova mogu se koristiti samo kao referenca. Korisnici bi trebali prevladavati u prirodi. S obzirom na dosljednu politiku kontinuiranog poboljšanja proizvoda, tvrtka zadržava pravo promjene specifikacija proizvoda bez prethodne najave.

SAVJETI

Da biste prvi put koristili ovaj proizvod, provedite test osjetljivosti kože za svaki dio i pričekajte 24 sata prije depilacije osjetljivosti. (Napomena: Ako primijetite bilo kakvu promjenu boje kože od posljednjeg puta, poput tamnjenja kože, ponovite test kože.) Da biste postigli najbolje učinke, tijekom testa kože pokušajte odabrati najveći intenzitet koji neće uzrokovati nelagodu na koži. Nemojte gledati izravno u otvor za svjetlost niti trepnuti okom tijekom rada. Molimo vas da nosite naočale. Ako je leća filtra na otvoru za svjetlost zamrljana, nemojte prskati alkohol izravno na otvor za svjetlost.

PRIPREMA

1. Za dijelove kojima je potrebna depilacija, uklonite dlake britvom. (Ispod 1 mm). (Napomena: Ne koristite kremu za depilaciju umjesto brijanja)
2. Očistite kožu kako biste osigurali da površina kože bude bez vlasi, potpuno suha i bez masnih tvari. (Na primjer, nemaju ostatke poput tekućine za mirise, losiona, parfema, kreme za sunčanje)
3. Provjerite jesu li uređaj i otvor za svjetlost čisti i uredni te jesu li preostali dlake, prašina i vlakna te druge zagađivače. Ako je tako, pažljivo ga obrišite.
4. Pogledajte dolje preporučenu tablicu intenziteta svjetlosti, prilagodite intenzitet svjetlosti u skladu s bojom kože i kose i održavajte se u ugodnom stanju.



Spektralna referenca mjerača intenziteta svjetlosti

Hair color	White/grey	Red	Beige	Light blond	Brown	Dark brown	Black
Skin color							
White	⊗	⊗	⊗	4/5	4/5	4/5	4/5
Beige	⊗	⊗	⊗	4/5	4/5	4/5	4/5
Light brown	⊗	⊗	⊗	4/5	4/5	4/5	4/5
Brown	⊗	⊗	⊗	1/2/3	1/2/3	1/2/3	1/2/3
Dark brown	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Black	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗

Napomena: 1. Ako osjetite bol ili nelagodu, smanjite intenzitet svjetlosti; 2. Preporučeni intenzitet svjetlosti (1-5) U sljedećoj tablici, "X" označava da ovaj proizvod nije prikladan za upotrebu. 3. Preporučuje se osjetljivostanje dijelova za depilaciju: nogu, pazuhu, ruku, dlačica s čela itd.



NAPOMENA:

Muški korisnici: nemojte koristiti ovaj proizvod na licu s bradom ili muškim spolnim organima. Ne upotrebljavajte oko očiju, blizu obrva, nosnica, unutar ušiju ili anusa. Korisnice: bradavice, areola, maloljetnice, rodnica, ne koriste.

NAČIN KORIŠTENJA



1. Spojite adapter za napajanje i dugo pritisnite tipku za pokretanje uređaja.



2. Kratko pritisnite tipke "+" i "-" za podešavanje postavke intenziteta svjetlosti. Odaberite prikladnu razinu prema vlastitoj situaciji. Što je viša razina, to je bolji učinak. Za početnike predlaže se da krene od najniže razine.




3. Tijekom rada nosite zaštitne sunčane naočale koje se nalaze u kutiji kako biste zaštitili oči.



4. Nanesite ovaj proizvod okomito na kožu, kratko pritisnite tipku i počnite osvjetljivati i depilirati.



5. Zadani način pokretanja ovog proizvoda je ručni način rada. Pritisnite i držite tipku "+" ili "-" za podešavanje na način rada Auto (u automatskom načinu rada ovaj proizvod može kontinuirano osvjetljivati i depilirati se prilikom dodira s kožom, s razmakom od 2-3 sekunde za svako osvjetljenje) i pomaknuti se na depilaciju.

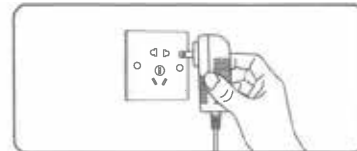

6. Nakon depilacije, pritisnite i držite tipku da biste isključili proizvod i izvukli adapter za napajanje.

ODRŽAVANJE I NJEGA NAKON UPOTREBE

Ako se tijekom uporabe pronađu problemi, pogledajte sljedeću tablicu kako biste provjerili abnormalnosti. Ako se problemi ne mogu riješiti, kontaktirajte službu za prodaju.

- Zabraniti upotrebu kozmetike koja iritira alkohol nakon uklanjanja dlaka.
- Ne iritirajte kožu područja za uklanjanje dlaka vrućom vodom iznad 50°C nakon upotrebe uklanjanja dlaka.
- Nemojte energično vježbati nakon uklanjanja dlaka, kako biste spriječili znojenje tijekom vježbanja i iritirali kožu u području uklanjanja dlaka.
- Molimo obratite pažnju na zaštitu od sunca nakon epilacije, ne izlažite izravno područje epilacije suncu.
- Preporučuje se izbjegavanje vode u roku od 6 sati nakon uklanjanja dlaka. Hidratantni proizvodi od vode / gela od aloe vere mogu se koristiti za vlaženje ozračenog područja.
- Vrijeme popravljivanja opekline od sunca nije kraće od jednog tjedna. Strogo je zabranjeno sunčati ozračeno područje u roku od 48 sati nakon izvođenja svjetlosne operacije. Čak i ako je sunčanje potrebno nakon 48 sati, uvijek morate obratiti pažnju na sva nezdruva stanja na koži. Molimo koristite kremu za sunčanje nakon 72 sata. (Povremeno ili neizravno izlaganje suncu ne pripada sunčanju)
- Ne koristite umjetno sunčanje za vrijeme osvjetljenja.
- Ako trebate plastičnu operaciju nakon osvjetljenja (samo područje ozračavanja), obratite se svom liječniku.
- Ako nakon brijanja i osvjetljenja koža na kratko postane suha i svrbi. Budite sigurni da ova reakcija nije štetna za tijelo, neće trebati dugo da nestane, a može se navlažiti blagom hidratantnom kremom.

GARANCIJA I SERVIS

1. inFace daje jednogodišnje jamstvo za svoje proizvode. Jamstveni rok započinje na datum kupnje.
2. Tijekom jamstvenog razdoblja pružamo uslugu zamjene dijelova ili cijelog proizvoda, ovisno o slučaju zbog oštećenja materijala ili proizvodnih procesa.
3. Da biste se prijavili za jamstvo, trgovcu morate dostaviti proizvod i potvrdu (račun za kupnju) koji dokazuju datum kupnje.
4. Garancijski servis ne podržava sljedeće uvjete:
 - A. Šteta nastala nepravilnim radom, poput pogrešnog napajanja, umetanja proizvoda u nepropisnu utičnicu ili druge umjetne štete itd.
 - B. Starenje i trošenje uzrokovano normalnom uporabom.
 - C. Problemi s proizvodom nastaju zbog druge upotrebe ili nepravilnog rukovanja ili neprofesionalnih popravaka ili korištenja pribora drugih tvrtki.
 - D. Potrošni materijal poput besplatnog pribora.
 - E. Šteta uzrokovana prirodnim katastrofama i drugom višom silom (grmljavina i munja, potres, poplava itd.).

Zaštita okoliša

1. Ovaj proizvod, piling i pribor za pakiranje izrađeni su od materijala koji se mogu reciklirati.
2. Podijelite otpad u različite "reciklirajuće količine" kako biste olakšali recikliranje korisnih materijala.



UOBIČAJENA PITANJA

1. Mogu li ga koristiti muškarci?

Odgovor: Ovaj proizvod mogu koristiti i muškarci i žene.

2. Osjećaj topline u uporabnom dijelu

Odgovor: Ovaj proizvod prihvaća tehnologiju pulsirajućeg svjetla, a uporabni dio ima topli osjećaj, što je normalna pojava. Ako se osjećate loše, možete spustiti položaj zupčanika i odabrati udoban položaj zupčanika za ozračivanje.

3. Nadražuje li kožu?

Odgovor: Ovaj proizvod usvaja tehnologiju pulsnog svjetla za izravno udaranje melanina u korijen folikula dlake bez stimulacije. Ovaj proizvod koristi integrirani optički filter kako bi osigurao sigurnost kože.

4. Koliko često ga koristite?

Odgovor: Kosa na mjestu depilacije obično je u različitim fazama ciklusa rasta dlake. Kako bi učinkovito djelovao na svu kosu, prva dva mjeseca postupak zračenja treba ponoviti jednom tjedno.

5. Trebate li zamijeniti poklopac lampe?

Odgovor: Ovaj proizvod ne treba zamijeniti žarulje visokih performansi. Cijev žarulje ovog proizvoda ima vijek trajanja bljeskalice više od 900 000 puta i može održavati učinak osvjetljenja više od 5 godina (na temelju prosječne upotrebe jednog korisnika i preporučene metode osvjetljenja), čime štedite troškove kupnja skupih poklopaca svjetiljki.

Odlaganje otpada

Ova oznaka na ovom proizvodu, priručniku s uputama ili omotu označava da se ovaj proizvod na kraju korisnog vijeka ne može tretirati kao opći kućni otpad. Posavjetujte se s lokalnom upravom za recikliranje na temelju klasifikacije otpada.



JAMSTVENA KARTICA

Broj proizvoda: _____
Datum kupnje: _____
Korisničko ime: _____
Adresa korisnika: _____
Kontakt broj: _____
Naziv proizvođača: _____
Podaci o zastupniku: _____
Broj narudžbe: _____
Opis kvara: _____

(Molimo vas da detaljno popunite sadržaj jamstvene kartice tijekom zahtjeva za servis, ovaj proizvod ima jednogodišnje jamstvo)



Naziv proizvoda _____ Aparat za lasersko uklanjanje dlačica
Model proizvoda _____ ZH-01D
Datum proizvodnje _____
Provjera kvalitete _____

POTVRDA O SUKLADNOSTI

Shenzhen Migoo Smart Co., Ltd.

KONTAKT INFORMACIJE

Telefon: 400-007-8388.
WeChat servis: migoosmart
Podaci o tvrtki: Shenzhen Migoo SmartCo., Ltd.
Shenzhen inFace Technology Co, Ltd
Adresa: Soba 807, zgrada U6, industrijski park pametne proizvodnje Junxiang U8, avenija Hangcheng, zajednica Gushu, ulica Xixiang i okrug Baoan, Shenzhen
Email: service@migoosmart.com
Poštanski broj: 518000



Skenirajte da biste dobili korisničke upute



WeChat javni račun



Služba za korisnike WeChat-a

Pravo konačnog tumačenja pripada tvrtki Shenzhen Migoo SmartCo., Ltd.